



Product Catalog

joy [®] **drops**
Lubricants

INDEX CATALOG



COMPANY PROFILE

Since 2000 **Turkuaz Company**, present in Business & Experienced stuff of Administrative and R & D Departments; has aimed at providing consumable Medical goods for all area of application in Hospitals, Dental Clinics, Laboratories, Pharmacy OTC Sectors etc.

In order to accomplish this objective, Turkuaz has kept working hard and making large investments in Research & Development to develop our specific selective formulates with a well organised, disciplined operation task conducted by experts of its management & science teams.

As a consequence of Manufacturing best Quality and specific/selective products with most competitive prices, Turkuaz had to broaden its product range & diverted upon increasing demand of esteemed clients. Apart from such fast growth of the company & its good reputation built in years, we, as Turkuaz Family, are proud of obtaining High Quality Control & Service through Manufacturing and Developing our formulated Products that enable every relevant user to ease their lives.

Quality of our Manufacturing and Products is evidenced by **TS EN ISO 13485:2016 & TS EN ISO 9001:2015, CE, FDA** Certificates, Analysis & Test Chemical and Microbiological Reports, our Manufacturing Process is implemented according to **GMP** & has **International System Standards** to put into practice Quality & Control of all Production Processes from specific and selective Raw Materials (RM) to enantio or diastro selective Finished Product (FP).

Turkuaz Medical Exports to more than 80 countries all over the world including the US, West Europe, North Europe, African, Far Eastern & Middle Eastern Countries. Furthermore, in Domestic Market, Turkuaz is a leading & well-known establishment of its category. Turkuaz covers all product range in terms of sexual health and pleasure field.



- 01 // **Natural** Lubricant Gel
- 02 // **Herbal** Lubricant Gel
- 03 // **Strawberry** Lubricant Gel
- 04 // **Mint** Lubricant Gel
- 05 // **Chocolate** Lubricant Gel
- 06 // **Cherry** Lubricant Gel
- 07 // **Silicone** Lubricant Gel
- 08 // **Warming** Lubricant Gel
- 09 // **Enhancement** Lubricant Gel
- 10 // **Erection** Lubricant Gel
- 11 // **Delay** Lubricant Gel
- 12 // **Delay** Cream
- 13 // **Delay** Spray
- 14 // **Delay** Wet Wipe
- 15 // **Penis** Enlargement Cream
- 16 // **Breast** Firming Cream
- 17 // **Vagina** Tightener Gel
- 18 // **Genital** Bleaching Cream
- 19 // **Intimate For Women**
Hygiene Cleaner Liquid
- 20 // **Intimate For Women**
Hygiene Cleaner Foam
- 21 // **Intimate For Men**
Hygiene Cleaner Liquid
- 22 // **Intimate For Men**
Hygiene Cleaner Foam
- 23 // **Genital Wet Wipe**
Before & After Sex
- 24 // **2in1** Sensual Massage Lubricant Gel
- 25 // Sensual Massage Oil
- 26 // **Sex Toy** Cleaner Spray
- 27 // Production & Quality Certificates



Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Natural Lubricant Gel

جل مزلق طبيعي



Compositions: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Natural Glycerin, Monopropylene Glycol, Methyl Hydroxybenzoate, Citric Acid

Properties: Natural Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. It is compatible with condoms. It does not spoil condom's texture. It is hypo-allergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply gel on the skin and rub gently before sexual intercourse.

Storage: To be stored inside its box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق الطبيعي وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على البشرة ويفرك بلطف قبل الجماع.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Naturel Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişki öncesinde cilt üzerine nazikçe ovalayarak uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

Herbal Lubricant Gel

جل مزلق بالأعشاب

Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Herbal Glycerin, Citric Acid, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Deionized water

Properties: Herbal Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It can be securely used in sexual intercourses due to its natural herbal compounds. Herbal composition of the gel softens and moisturizes the area when it is applied. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. It is hypo- allergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق الطبيعي وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على البشرة ويفرك بلطف قبل الجماع.

التخزين: يحفظ داخل عبئته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Herbal Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Bitkisel karışımı sayesinde uygulama yapılan bölgeyi yumuşatır ve nemlendirir. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



[REF] T0000.302.0003

[REF] T0000.302.0002



Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Strawberry Lubricant Gel

جل مزلق بنكهة الفراولة



Compositions: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, MonoPropylene Glycol, Citric Acid, Strawberry Flavour, Sodium Saccharin, Methyl Hydroxybenzoate

Properties: Strawberry Personal Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It cheers you up with its instance and special aroma. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. Its nutriment-based aromas are compatible with skin's natural pH. It is also compatible with condoms. It does not damage condom's texture. It is hypoallergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق بالفراولة وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يعطي هذا الجل إحساسا منعشا بفضل نكهته الخاصة، يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. خواصه المغذية تجعله متوافقا مع درجة الحموضة الطبيعية للجلد. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف للتزليق.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Strawberry Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Yoğun çilek aroması ile ilişkinize renk katarken, oluşabilecek kötü kokuları da baskılar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Mint Lubricant Gel

جل مزلق بنكهة النعناع

Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, MonoPropylene Glycol, Citric Acid, Mint Flavour, Sodium Saccharin, Methyl Hydroxybenzoate, Deionized water

Properties: Mint Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It adds colourful fantasies and cheers you up by the instance aroma it has. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. Its nutriment- based aromas are compatible with skin's natural pH. It is also compatible with condoms. It does not damage condom's texture. It is hypoallergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق بالنعناع وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يعطي هذا الجل إحساسا منعشا بفضل نكهته الخاصة، يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. خواصه المغذية تجعله متوافقا مع درجة الحموضة الطبيعية للجلد. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف للتزليق.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Nane Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır. Yoğun nane aroması ile ilişkiniz renk katarken, oluşabilecek kötü kokuları da baskılar.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



[REF] T0000.304.0002

[REF] T0000.304.0003



joy drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Chocolate Lubricant Gel

جل مزلق بنكهة الشكولاتة



Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, MonoPropylene Glycol, Citric Acid, Chocolate Flavour, Sodium Saccharin, Methyl Hydroxybenzoate, Deionized water

Properties: Chocolate Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It adds colourful fantasies and cheers you up by the instance aroma it has. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. Its nutriment-based aromas are compatible with skin's natural pH. It is also compatible with condoms. It does not damage condom's texture. It is hypoallergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق بالشكولاتة وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. يعطي هذا الجل إحساسا منعشا بفضل نكهته الخاصة، يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. خواصه المغذية تجعله متوافقا مع درجة الحموضة الطبيعية للجلد. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا. الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف للتزليق.

التخزين: تجنب تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Çikolata Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır. Yoğun çikolata aroması ile ilişkinize renk katarken, oluşabilecek kötü kokuları da baskılar.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Cherry Lubricant Gel

جل مزلق بنكهة الكرز

Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, MonoPropylene Glycol, Citric Acid, Cherry Flavour, Sodium Saccharin, Methyl Hydroxybenzoate, Deionized water

Properties: Cherry Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It adds colourful fantasies and cheers you up by the instance aroma it has. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. Its nutriment- based aromas are compatible with skin's natural pH. It is also compatible with condoms. It does not damage condom's texture. It is hypoallergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق بالكرز وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعييار CE. يعطي هذا الجل إحساسا منعشا بفضل نكهته الخاصة، يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع. خواصه المغذية تجعله متوافقا مع درجة الحموضة الطبيعية للجلد. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التآريج (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا. الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف للتزليق.

التخزين: تجنب تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو

التخزين: يحفظ داخل علته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Kiraz Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır. Yoğun kiraz aroması ile ilişkinize renk katarken, oluşabilecek kötü kokuları da baskılar.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



REF T0000.306.0002

REF T0000.306.0003



joy drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Silicone Lubricant Gel جل مزلق سيلكوني



Compositions: Dimethicone, Cyclomethicone, Dimethiconol

Properties: Silicone Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. Silicone Lubricant Gel is not absorb by the skin as much as water based lubricants and keeps its lubricating effect moreover, it can be securely and comfortably used under water. It is compatible with condoms. It does not spoil condom's texture. It is hypoallergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area for lubrication.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق السيلكوني وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. ان الجل السيلكوني لا يتم امتصاصه من طرف الجلد مثله مثل المزلاقات المائية فيدوم مفعوله لمدة أطول، يمكن استخدامه بسهولة وبأمان تحت الماء. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التآريج (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف للتزليق.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Silikon Lubrikant Jel hassasiyet ve zevkinizi artırarak daha yoğun ve tatmin edici bir cinsel birleşme sağlar. Vajinal kuruluk vakalarında mutlaka kullanılmalıdır. Su bazlı kayganlaştırıcılar gibi cilt tarafından emilmez ve kayganlaştırıcı etkisini korur. Ayrıca, su altında güvenle ve rahatlıkla kullanılabilir. Sudan etkilenmez.

Kullanım Şekli: Kayganlığı sağlamak için yeterli miktarda jeli istenilen bölgeye uygulayın.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Warming Lubricant Gel

جل مزلق محمي

Composition: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Mono Propylene Glycol, Guarana extract, Glycerin, Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate

Properties: It is a topical gel with sensation of warming, it increases the effect cooling or tingling, moisturizing / lubricating. You will feel the warming effect of this product by the first second it is applied. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo-allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply enough gel to desired area and rub before sexual intercourse.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق المحمي وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. هذا الجل هو جل موضعي يعطي إحساسا بالاحماء ويزيد من درجة الرعشة الجنسية، يرطب ويزلق، يمكن الإحساس بمفعول الاحماء من الثانية الأولى. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على المنطقة المرغوبة ويفرك بلطف، قبل الجماع.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Isıtıcı Etkili Lubrikant Jel uygulanır uygulanmaz kızıştırıcı etkisini gösterir daha fazla cinsel haz ve heyecan verir.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce genital bölgeye bir miktar uygulanması yeterlidir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



[REF] T0000.308.0002

[REF] T0000.308.0004



joy drops®

Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Enhancement Lubricant Gel

جل مزلق معزز للنساء



Compositions: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, L-Arginine, Mono Propylene Glycol, Glycerin, Methyl Nicotinate, Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate

Properties: L-Arginine provide higher blood flow to make clitoral and vaginal tissues more sensitive and responsive to sexual stimulation helps to increase the possibility of reaching orgasm. Menthol and L-arginine helps increasing the circulation of the blood and nerves response. Thus, increasing blood flow to the clitoris and stimulating nerve endings. It shows its effect almost immediately when applied onto clitoris. Compatible with skin's natural pH level. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo-allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply enough on clitoris and rub gently before sexual activity. If you use regularly you will get better results.

Storage: To be stored inside its box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المعزز للنساء وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يساعد الأرجنين على الزيادة في تدفق الدم الشيء الذي يجعل البظر والنسيج المهبل أكثر حساسية للإثارة الجنسية مما يساعد على الوصول إلى الرعدة الجنسية. إن احتواء هذا الجل على المينثول و الأرجنين يساعد الدم على الجريان بسهولة والإشارات العصبية في البظر، يمكن ملاحظة الفعالة مباشرة بعد التطبيق. متوافق مع درجة حموضة الجلد ومع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على البظر ويفرك بلطف، قبل الجماع. ستلاحظ نتائج مبهره بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® İstek Artırıcı Lubrikant Jel, içeriğindeki L-Arginine ile cinsel organlara giden kan akışını hızlandırarak cinsel arzuyu uyandırır. Kilitörise uygulandığında etkisini gösterir. Kadınlarda orgazm olabilmeyi kolaylaştırır.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce klitoris bölgesine küçük bir miktar uygulanması yeterlidir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Erection Lubricant Gel

جل مزلق للانتصاب

Compositions: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, L-Arginine, Mono Propylene Glycol, Ginseng Extract, Glycerin, Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate

Properties: L-Arginine provides a higher blood circulation to the genital area by dilating blood vessels and resulting in a better penile erection and hardness as well as an improved orgasm quality. Menthol and L-arginine helps increasing the circulation of the blood and nerves response. Thus, increasing blood flow to the penis with harder erection. A much stronger, longer lasting erection is obtained during this process. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo-allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply enough on penis and rub gently before sexual intercourse. If you use regularly you will get better results.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق للانتصاب وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. ان المنتج الذي يحتويه هذا الجل يساعد على امتصاص مادة الارجينين الذي تعمل كموسع للأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم ضمن القضيب معطيا انتصابا أقوى ولمدة أطول الشيء الذي يعطي رعشة جنسية أحسن. متوافق مع الواقي الذكري انه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على القضيب ويفرك بلطف، قبل الجماع. ستلاحظ نتائج مبهره بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Ereksiyon Sağlayıcı Lubrikant Jel içeriğindeki Ginseng bitkisi ile sertleşme sorununun giderilmesine yardımcı olarak cinsel isteği artırır. Jel uygulandığı bölgedeki kan dolaşımını artırır ve kanın bölgeye pompalanmasını hızlandırarak uzun süreli ereksiyon sağlar.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce yeterli miktarda ürünü penise masaj yaparak uygulayınız. Daha iyi sonuç için ürünün düzenli kullanılması önerilir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



[REF] T0000.310.0005

[REF] T0000.310.0002



joy drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Delay Lubricant Gel

جل مزلق لتأخير القذف



Compositions: Deionized water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Clove Oil, Mono Propylene Glycol, Glycerin Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate

Properties: It helps to delay ejaculation by numbing male organ which reaches to an excessive sensitivity during erection. A pleasant and longlasting sexual intercourse deepens intimacy between couples. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo-allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply the gel on your hands and rub gently to the foreskin zone, head and underneath your penis, 5-10 minutes before sexual intercourse for best result.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق لتأخير القذف وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يعمل هذا المستحضر على تأخير عملية القذف عند الأشخاص ذوي حساسية القذف السريع دون فقدان متعة الإحساس بلذة القذف أثناء الجماع مما يطيل مدة المتعة الجنسية. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التآريج (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على اليدين ثم بفرك القضيب بلطف خصوصا على القلفة ومحيط الحشفة، قبل الجماع ب 5 الى 10 دقيقة لنتائج أفضل.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Geciktirici Etkili Lubrikant Jel, lokal olarak penise uygulanır ve ereksiyon halinde aşırı derecede hassas olan penisin duyarlılığını azaltarak, boşalmanın gecikmesine yardımcı olur. Zevkli ve uzun süren cinsel birliktelik sağlar.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce yeterli miktarda ürünü penise nazıkçe masaj yaparak uygulayınız.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Delay Cream

كريم تأخير القذف

Compositions: Deionized Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearth-25, Disodium Ethylene Dicocamide PEG-15 Disulfate, Acacia Senegal Gum, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Stearate Citrate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Citric Acid, Undecyl Alcohol, Clove Oil, Glycerin, Olive Oil Peg-7 Esters, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Properties: It helps to delay ejaculation by numbing male organ which reaches to an excessive sensitivity during erection. A pleasant and longlasting sexual intercourse deepens intimacy between couples. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo-allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply cream on the hands and rub gently on the penis 5-10 minutes before sexual intercourse for best result.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق لتأخير القذف وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. يعمل هذا المستحضر على تأخير عملية القذف عند الأشخاص ذوي حساسية القذف السريع دون فقدان متعة الإحساس بلذة القذف أثناء الجماع مما يطيل مدة المتعة الجنسية. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يتم تطبيق الكريم على اليدين ثم يفرك القضيب بلطف، قبل الجماع ب 5 إلى 10 دقيقة لنتائج أفضل.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Geciktirici Etkili Krem, lokal olarak penise uygulanır ve ereksiyon halinde aşırı derecede hassas olan penisin duyarlılığını azaltarak, boşalmanın gecikmesine yardımcı olur. Zevkli ve uzun süren cinsel birliktelik sağlar.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce yeterli miktarda ürünü penise nazıkçe masaj yaparak uygulayınız.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).





joy drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Delay Spray

بخاخ لتأخير القذف



Compositions: Ethyl Alcohol, Clove Oil, Mono Propylene Glycol, Glycerin, Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate, Deionized water

Properties: It helps to delay ejaculation by numbing male organ which reaches to an excessive sensitivity during erection. A pleasant and long- lasting sexual intercourse deepens intimacy between couples. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo- allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply spray on the penis and rub gently to the foreskin zone, head and underneath your penis, 5-10 minutes before sexual intercourse for best result.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يعد هذا البخاخ لتأخير القذف جهازاً طبياً من الدرجة class I وفقاً لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE يعمل هذا المستحضر على تأخير عملية القذف عند الأشخاص ذوي حساسية القذف السريع دون فقدان متعة الإحساس بلذة القذف أثناء الجماع مما يطيل مدة المتعة الجنسية. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثراً.

الاستخدام: يرش البخاخ على القضيب ثم يفرك بلطف خصوصاً على القلفة ومحيط الحشفة، قبل الجماع ب 5 إلى 10 دقيقة لنتائج أفضل.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Geciktirici Etkili Delay Spray, lokal olarak penise uygulanır ve ereksiyon halinde aşırı derecede hassas olan penisin duyarlılığını azaltarak, boşalmanın gecikmesine yardımcı olur. Zevkli ve uzun süren cinsel birliktelik sağlar.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce yeterli miktarda ürünü penise spreyledikten sonra nazikçe masaj yaparak uygulayınız.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Delay Wet Wipe

منديل لتأخير القذف

Compositions: Ethyl Alcohol, Clove Oil, Mono Propylene Glycol, Glycerin, Citric Acid, Propyl Hydroxybenzoate, Methyl Hydroxybenzoate, Deionized water

Properties: It helps to delay ejaculation by numbing male organ which reaches to an excessive sensitivity during erection. A pleasant and long-lasting sexual intercourse deepens intimacy between couples. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo- allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Simply apply for 1-2 min. by wiping to the foreskin zone, head and underneath your penis, before 5-10 minutes from sexual intercourse for best result.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذه المنديل لتأخير القذف وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. يعمل هذا المستحضر على تأخير عملية القذف عند الأشخاص ذوي حساسية القذف السريع دون فقدان متعة الإحساس بلذة القذف أثناء الجماع مما يطيل مدة المتعة الجنسية. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يسمح القضيب بواسطة المنديل بلطف ما بين دقيقة الى دقيقتين خصوصا على القلفة ومحيط الحشفة، قبل الجماع ب 5 الى 10 دقيقة لنتائج أفضل.

التخزين: يحفظ داخل عبوته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Geciktirici Etkili Islak Mendil, lokal olarak penise uygulanır ve ereksiyon halinde aşırı derecede hassas olan penisin duyarlılığını azaltarak, boşalmanın gecikmesine yardımcı olur. Zevkli ve uzun süren cinsel birliktelik sağlar.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce penis 1-2 dakika boyunca mendil ile silinecek şekilde uygulanır.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).





Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Penis Enlargement Cream

كريم لتكبير القضيب



Compositions: Deionized Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetareth-25, Disodium Ethylene Dicoamide PEG-15 Disulfate, Acacia Senegal Gum, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Stearate Citrate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Citric Acid, Undecyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Olive Oil Peg-7 Esters, Butylene Glycol, Sorbitol, Propylene glycol, Bambusa Vulgaris Shoot Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Nymphaea Alba Root Extract, Panthenol, Carbomer, Tri Ethanol Amin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Properties: It improves blood circulation to the penis by giving harder erection, thicker penis girth, longer lasting erection, beats premature ejaculation and longer penis length with more pleasurable activity by thickening male organ during sexual intercourse. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo- allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Apply enough gel to penis 2 times by day. Rub onto your skin using a circular motion and gently 5-10 min before previous to the sexual intercourse. You should use it regularly for better results.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا كريم لتكبير القضيب وفقاً لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعياري CE. يعمل على تحسين تدفق الدم ضمن القضيب معطياً انتصاباً أوى وسماكاً وحجم أكبر للعضو الذكري عند تطبيقه بشكل منتظم، من خلال امتصاصه السريع، معطياً للقضيب حجماً أكبر مؤدياً للذة وممتعة أكثر. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفقد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثراً.

الاستخدام: يطبق الكريم مرتين في اليوم للقضيب وذلك بفركه بحركة دائرية، خمس إلى عشر دقائق قبل الجماع. ستلاحظ نتائج مبيرة بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

İlişkiden önce penise uygulandığında penisin belli bir süre kalınlaşmasını sağlayarak cinsel birleşmeyi daha zevkli hale getirir.

Kullanım Şekli: Günde 2 defa penise yeterli miktarda jel uygulayın. Cinsel ilişkiden 5-10 dakika önce cildinize sürün ve dairesel hareketlerle nazıkçe uygulama yapın. En iyi sonuç için düzenli kullanmanız önerilir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Breast Firming Cream

كريم لشد الصدر

Compositions: Deionized Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearth-25, Disodium Ethylene Dicocamide PEG-15 Disulfate, Acacia Senegal Gum, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Stearate Citrate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Citric Acid, Undecyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Olive Oil Peg-7 Esters, Commiphora mukul resin extract, Carbomer, Tri Ethanol Amin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Properties: Breast Firming Cream, which firms the breast shape without a need to go through a plastic surgery, offers a safe use and nurturing functions for breast area.

Usage: Apply enough gel on breast area 2 times by day. Rub into your skin using a circular motion and gently. You should use it regularly for better results.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الكريم لشد الصدر وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. يساعد هذا المستحضر على تحسين شكل الصدر عند تطبيقه بشكل منتظم من خلال امتصاصه السريع، معطيا للصدر شكلا وحجما أكبر مع أمان مطلق عند استعماله دون اللجوء الى العمليات الجراحية البلاستيكية.

الاستخدام: يطبق الكريم بكمية وافرة على الصدر مرتين في اليوم وذلك بتدليكه بحركة دائرية، ستلاحظ نتائج مبهره بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Göğüs bölgesine bir miktar ve düzenli uygulandığında, göğüslerin sıkılaşmasını sağlar. Göğüslerde oluşan sarkma ve yumuşaklığı toparlamaya yardımcıdır.

Kullanım Şekli: Günde 2 defa göğüs bölgesine yeterli miktarda jel dairesel hareketlerle nazikçe uygulanır. En iyi sonuç için düzenli kullanmanız önerilir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).





Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Vagina Tightener Gel جل لتضييق المهبل



Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Mono Propylene Glycol, Glycerin, Citric Acid, Chitosan (and) Glycolic Acid (and) Alcohol (and) Glycosaminoglycans (and) Methylparaben, Alüminyum chlorohydrate, Ethyl Paraben, Deionized water

Properties: It is a product that renovates the structure of worn and reduced lips of female organ and enables male and female take more pleasure in sexual intercourse. It provides a sustainable effect in long-term applications and remains effective for about 30-45 minutes after single application. Long-term usage recovers structure of vagina. It is compatible with condoms and does not spoil condom's texture. Hypo- allergenic, easy to remove without stain.

Usage: Apply enough gel on the interior lips of vagina and rub gently before 5-10 min. previous to sexual activity. You should use it regularly for better results.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل لتضييق المهبل وفقا لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93، ومعيار CE. يعمل على تقليص الجلد من خلال تقليصه لشفاة المهبل وفتحته مما يؤدي لمزيد من المتعة واللذة طويلة الأمد أثناء الجماع، بحوالي 30 إلى 45 دقيقة. متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثرا.

الاستخدام: يطبق الجل بكمية وافرة مرتين في اليوم وذلك بتدليكك بلطف، ستلاحظ نتائج مبهرة بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Yıpranan ve deforme olan vajina yapısını lokal olarak yenileyen, ilişki sırasında erkek ve kadının daha fazla zevk almasını sağlayan bir üründür. Kullanım Şekli: Cinsel ilişkiden 5-10 dk önce yeterli miktarda gel vajina dudaklarına nazikçe uygulanır. En iyi sonuçlar için düzenli kullanım önerilir. Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Genital Bleaching Cream

كريم لتبييض الأماكن الحساسة

Compositions: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetareth-25, Disodium Ethylene Dicosamide PEG-15 Disulfate, Acacia Senegal Gum, Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Stearate Citrate, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Tocopherol, Citric Acid, Undecyl Alcohol, Glycerin, Liquid Paraffin, Olive Oil PEG-7 Esters, Hydrolyzed Wheat Flour, Carbomer, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerol

Properties: Reinvent your natural look by Genital Bleaching Cream. It gets rid of the unappealing look of your skin. Dissolves dark spots away and generates a silky layer of skin.

Usage: Apply enough cream by massaging gently 2 times by day to the desired and dark area. You should use it regularly for better results.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يعمل هذا المنتج على تفتيح وتبييض الجلد بالأماكن الحساسة، وذلك من خلال إزالة كافة البقع السوداء والداكنة من الأماكن الحساسة، معطيا للجلد بيضاء، نعومة وحيوية أكثر في تلك المناطق.

الاستخدام: يطبق الكريم بكمية وافرة للأماكن الحساسة مرتين في اليوم وذلك بتدليك بلطف، ستلاحظ نتائج مبهره بعد الاستخدام المنتظم.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® Genital Bölge Renk Açıcı ile istediğiniz doğal görünüme yeniden kavuşun. Genital bölgede çeşitli sebeplerden dolayı oluşan ton değişikliklerinin ve kararmaların giderilmesine yardımcı olur. Ciltte ipeksi bir his bırakır.

Kullanım Şekli: Koyu görünen ve beyazlaşması istenen bölgeye günde 2 defa nazıçke masaj yaparak uygulanır. En iyi sonuçlar için düzenli kullanım önerilir. Durulama gerektirmez.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).





Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Intimate For Women Hygiene Cleaner Liquid

غسول سائل للمناطق الحساسة للنساء



[REF] T0000.319.0001

Compositions: Deionized water, Cocoamido Propyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Cocamide DEA, Glycerin, Chamomilla recutita Extract, Fragrance, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexamidine Disethionate

Properties: It helps to remove all dirt and bad odour by killing most of the bacteria and fungal with specially prepared formula. Restores the area through providing a hygienic, pleasant smelling when applied to genital area by a little amount.

Usage: Foam it with water and clean genital area with warm water. For external use only.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يساعد هذا المستحضر على إزالة كافة الأوساخ، الروائح الكريهة، البكتيريا والجراثيم من منطقة المهبل متفاديا نقل أي ميكروب أو بكتيريا للشريك معطيا بذلك علاقة جنسية أكثر أمانا.

الاستخدام: تضاف كمية قليلة من الماء للحصول على رغوة، ثم تغسل بها المناطق الحساسة جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر. للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Genital bölgeye bir miktar uygulandığında, bölgenin hijyenik, hoş kokulu bir yapıya kavuşmasını sağlar. pH 4.2 özelliği ile genital bölgenin doğal dengesini koruyan yapıya sahip bir temizleyicidir.

Kullanım Şekli: Bir miktar ürünü ılık su ile köpürterek genital bölgeyi temizleyiniz. Sadece harici kullanım içindir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Intimate For Women Hygiene Cleaner Foam

رغوة للمناطق الحساسة للنساء

Compositions: Deionized water, Cocoamido Propyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Chamomilla Recutita Extract, Citric Acid, Fragrance, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hexamidine Disethionate

Properties: It helps to remove all dirt and bad odour by killing most of the bacteria and fungal with specially prepared formula. Restores the area through providing a hygienic, pleasant smelling when applied to genital area by a little amount.

Usage: Put enough foam to your hand and clean genital area with warm water. For external use only.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يساعد هذا المستحضر على إزالة كافة الأوساخ، الروائح الكريهة، البكتيريا والجراثيم من منطقة المهبل متفاديا نقل أي ميكروب أو بكتيريا للشريك معطيا بذلك علاقة جنسية أكثر أمانا.

الاستخدام: تضاف كمية وافرة من الرغوة، ثم تغسل بها المناطق الحساسة جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر. للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Genital bölgeye bir miktar uygulandığında, bölgenin hijyenik, hoş kokulu bir yapıya kavuşmasını sağlar. pH 4.2 özelliği ile genital bölgenin doğal dengesini koruyan yapıya sahip bir temizleyicidir. Hazır köpük formu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli: Avucunuza bir miktar köpük alarak temizlenecek gölgeye uygulayınız. Sadece harici kullanım içindir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).






joy
drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Intimate For Men Hygiene Cleaner Liquid

غسول سائل لتنظيف المناطق الحساسة للرجال

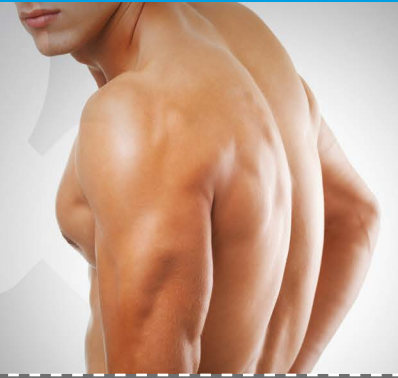

Compositions: Deionized water, Cocoamido Propyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Cocamide DEA, Glycerin, Chamomilla recutita Extract, Fragrance, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexamidine Disethionate

Properties: Restores the area through providing a hygienic, pleasant smelling when applied to genital area by a little amount.

Usage: Foam it with water and dean genital area with lukewarm water.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يساعد هذا المستحضر على إزالة كافة الأوساخ، الروائح الكريهة، البكتيريا والجراثيم من المناطق الحساسة للرجال متفاديا نقل أي ميكروب أو بكتيريا للشريك معطيا بذلك علاقة جنسية أكثر أمانا.

الاستخدام: تضاف كمية قليلة من الماء للحصول على رغوة، ثم تغسل بها المناطق الحساسة جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر. للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Genital bölgeye bir miktar uygulandığında, bölgenin hijyenik, hoş kokulu bir yapıya kavuşmasını sağlar. Cilde uyumlu pH değeri ile ile genital bölgenin doğal dengesini koruyan yapıya sahip bir temizleyicidir. **Kullanım Şekli:** Bir miktar ürünü ılık su ile köpürterek genital bölgeyi temizleyiniz.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

Intimate For Men Hygiene Cleaner Foam

Compositions: Deionized water, Cocoamido Propyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Chamomilla Recutita Extract, Citric Acid, Fragrance, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hexamidine Disethionate

Properties: Restores the area through providing a hygienic, pleasant smelling when applied to genital area by a little amount.

Usage: Put enough foam to your hand and clean genital area with warm water.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يساعد هذا المستحضر على إزالة كافة الأوساخ، الروائح الكريهة، البكتيريا والجراثيم من المناطق الحساسة للرجال متفاديا نقل أي ميكروب أو بكتيريا للشريك معطيا بذلك علاقة جنسية أكثر أمانا.

الاستخدام: تضاف كمية وافرة من الرغوة، تم تغسل بها المناطق الحساسة جيدا ثم تشطف بالماء الفاتر. للاستعمال الخارجي فقط.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Genital bölgeye bir miktar uygulandığında, bölgenin hijyenik, hoş kokulu bir yapıya kavuşmasını sağlar. Cilde uyumlu pH değeri ile genital bölgenin doğal dengesini koruyan yapıya sahip bir temizleyicidir. Hazır köpük formu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanım Şekli: Avucunuza bir miktar köpük alarak temizlenecek gölgeye uygulayınız.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



[REF] T0000.322.0001



Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Genital Wet Wipe Before & After Sex

منديل لتنظيف وتطهير المناطق الحساسة
قبل وبعد الجماع



Compositions: Aqua, Cocoamido Propyl Betaine, Propylene Glycol, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, Allantoin, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerint

Properties: It helps to remove all dirt and bad odour by killing most of the bacteria and fungal with specially prepared formula. Restores the genital area through providing a hygienic, pleasant smelling when applied to genital area by wiping.

Usage: Wip the genital area by tissue before or after sexual intercourse.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يساعد هذا المستحضر على إزالة كافة الأوساخ، الروائح الكريهة، البكتيريا والجراثيم من المناطق الحساسة للرجال والنساء متفاديا نقل أي ميكروب أو بكتيريا للشريك معطيا بذلك علاقة جنسية أكثر أمانا.

الاستخدام: تمسح المنطقة الحساسة بالمنديل جيدا قبل أو بعد الجماع.

التخزين: يحفظ داخل علبة وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Genital bölgeye bir miktar uygulandığında, bölgenin hijyenik, hoş kokulu bir yapıya kavuşmasını sağlar. Cilde uyumlu pH özelliği ile genital bölgenin doğal dengesini koruyan yapıya sahip bir temizleyicidir.

Kullanım Şekli: Cinsel ilişki öncesinde ya da sonrasında genital bölgeye 1-2 dakika boyunca nazıkçe uygulanır.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Sensual Massage Lubricant Gel

جل مزلق وللتدليك

Compositions: Hydroxy Ethyl Cellulose, Natural Glycerin, Monopropylene Glycol, Methyl Hydroxybenzoate, Citric Acid, Deionized water
Properties: 2in1 Sensual Massage Lubricant Gel is produced according to EU Medical Devices Directive 93/42/EEC, and CE marking. It can be used for vaginal dryness or as lubricant during sexual intercourse. It can be applied easily to all desired areas to get relaxing effect with its special fragrances. It is compatible with condoms. It does not spoil condom's texture. Hypo- allergenic, easy to clean and does not stain.

Usage: Simple apply Sensual Massage Lubricant Gel to the hand and rub gently to the desired area.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتم إنتاج هذا الجل المزلق وللتدليك في 1 و 2 وفقاً لمعايير مديرية الأجهزة الطبية للاتحاد الأوروبي EEC/42/93 ومعيار CE. يمكن أن يستخدم هذا الجل لتخفيف جفاف المهبل أو كمزلق أثناء الجماع كما يمكن استعماله للتدليك بفضل روائحه العطرية المهدئة. وهو متوافق مع الواقي الذكري أنه لا يفسد نسيجه، كما أنه ضعيف التأثير (لا يسبب حساسية)، سهل التنظيف ولا يترك أثراً.

الاستخدام: يتم تطبيق الجل على اليدين ثم يدلك بلطف للمنطقة المرغوبة.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

JoyDrops® 2in1 Masaj & Lubrikant Jel masaj keyfinizi uzatırken, kayganlaştırıcı etkisi ile istenilen her bölgede rahatlıkla kullanılabilir. JoyDrops® 2in1 Masaj & Lubrikant Jel prezervatif ile uyumludur.

Kullanım Şekli: Yeterli miktarda jel istenilen bölgeye masaj yaparak uygulanır.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).





joy
drop's

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Sensual Massage Oil

زيت للتدليك



Compositions: Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sweet Almond Oil, jojoba Oil, Tocopherol Oil, Fragrance Strawberry

Properties: Moisturizes and smooths the skin. Provides flexibility to your body. Strawberry, apricot and peach flavors are available. Different types of flavors can be prepared depending on your requests at any size.

Usage: Simply apply massage oil to the hand and rub gently to the desired area.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتميز هذا المستحضر بخواصه الترطيبية للجلد مؤديا للشعور بالارتخاء والراحة للجسم والعضلات أثناء عملية المساج، يوجد بنكهات وألوان مختلفة وعبوات مختلفة حسب الطلب.

الاستخدام: ضع كمية من زيت المساج على راحة اليد وذلك بلطف المكان المراد.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Cildi nemlendirir, vücuda esneklik ve rahatlama sağlar. Çilek, kayısı ve şeftali aromalı ürünler mevcuttur.

Kullanım Şekli: Yeterli miktarda masaj yağı istenilen bölgeye masaj yaparak uygulanır.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).



هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Our Target Is Your Happiness... For Better Life!



Sex Toy Cleaner Spray

بخاخ مطهر لأدوات المتعة الجنسية وملحقاتها

Compositions: Cocoamido Propyl Betaine, Ethyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Deionized water

Properties: It is a Cleaner Spray for cleaning and disinfecting all dirt and bacteria from sex toy and fantasy accessories with absolutely safety and high compatibility with any materials types (Latex, Silicone and Metal).

Usage: It's used as cleaner and disinfectant by spraying directly to all sex toys and fantasy accessories then wash it by water and dry before using.

Storage: To be stored inside it's box, in a dry and cool environment (ambient temperature between 5-30 °C).

الخصائص: يتميز هذا المستحضر بخواصه التنظيفية والتطهيرية فهو يعمل على إزالة كافة الأوساخ والبكتيريا من على أدوات المتعة الجنسية وملحقاتها بأمان مطلق وتوافقية عالية مع كافة أنواع الأدوات (لاتكس سيليكون معدن الخ)

الاستخدام: يستخدم كمنظف ومطهر بطريقة البخ المباشر على أدوات المتعة الجنسية وملحقاتها ثم تشطف بالماء وتجفف قبل الاستعمال.

التخزين: يحفظ داخل علبته وفي مكان جاف وبارد (في درجة حرارة الغرفة ما بين 5 و 30 درجة مئوية)

Cinsel oyuncakların temizliğinde güvenle kullanılır. Lateks, silikon ve metal oyuncaklar üzerinde herhangi bir deformasyona sebebiyet vermez. Uygulama sonrası durulandığında etkisini bir sonraki kullanıma kadar korur.

Kullanım Şekli: İstenilen ürün üzerine direkt spreylenerek temizlik sağlanır. Oyuncakların tekrar kullanımı öncesinde yıkanması ve kurulanması gerekir.

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir ortamda kutu içinde saklanmalıdır (ortam sıcaklığı 5-30 ° C arasında).






Our Target Is Your Happiness... **For Better Life!**

هدفنا هو اسعادكم ... لحياة أفضل!

Production & Quality Certificates

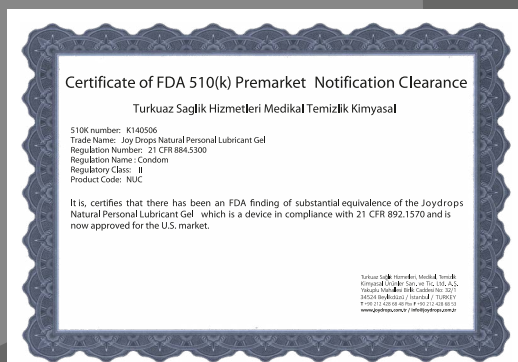

FDA Quality Certificate



HALAL Certificate



GMP Certificate



TS EN ISO 13485:2016 Certificate



TS EN ISO 9001:2015 Certificate

joy[®] drop's Lubricants

turkuaz 

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi No: 32/1
34524 Beylikdüzü / İstanbul / TURKEY
T +90 212 428 68 48 Pbx F +90 212 428 68 53
info@turkuazsaglik.com.tr / www.turkuazsaglik.com.tr



/turkuazsaglik



/turkuazsaglik



company/turkuaz-saglik

REF PIC.OO7.0023

REV: 05/28.02.2020